

Características técnicas / Technical features

Tapa/superficie de trabajo en ABS/PC con 3 rebordes. 770 x 480 x 60 mm
Top/surface work in ABS/PC with 3 flanges. 770 x 480 x 60 mm

Paredes con guías en ABS para almacenamiento interno de complementos ISO 6040
walls with ABS guides for internal storage of ISO 6040 complements

Configuración de cassettes personalizada.
*Se ofertan por separado
Custom cassette configuration.
*They are offered separately

Paragolpes en las 4 ruedas
Bumpers in 4 wheels

Base en compacmel
Compacmel base

Empujador ergonómico de metal. Altura regulable
Ergonomic metal push handle. Adjustable height

Paredes en fenólico altamente resistente
Highly resistant phenolic walls

Puerta persiana en PVC, apertura lateral y cierre con llave
PVC shutter door, side opening and key lock

Perfiles de aluminio anodizado para accesorios laterales y superiores
Anodized aluminum profiles for side and top accessories

4 ruedas anti-hilo de doble rodamiento, 2 con freno. Ø125 mm
4 anti-thread wheels double bearing, 2 with brake. Ø125 mm



Dimensiones / Dimensions ISO 600 x 400

**Diferentes alturas
**Different heights



5 Modelos disponibles / 5 available models

Los carros de medicación de cassette de la gama Convimed® son altamente configurables. Su diseño de guías internas en ABS permite una mayor capacidad de almacenamiento y una organización flexible de cassettes, bandejas y cestas de dimensiones ISO 600 x 400 mm. Según su configuración interna, están disponibles 5 modelos distintos.

The cassette medication carts of the Convimed® range are highly configurable. Its design of internal ABS guides allows a greater storage capacity and a flexible organization of cassettes, trays and baskets with ISO dimensions of 600 x 400 mm. According to its internal configuration, 5 different models are available.


F-C-6040-1050



F-C-6040-1150



F-C-6040-1270

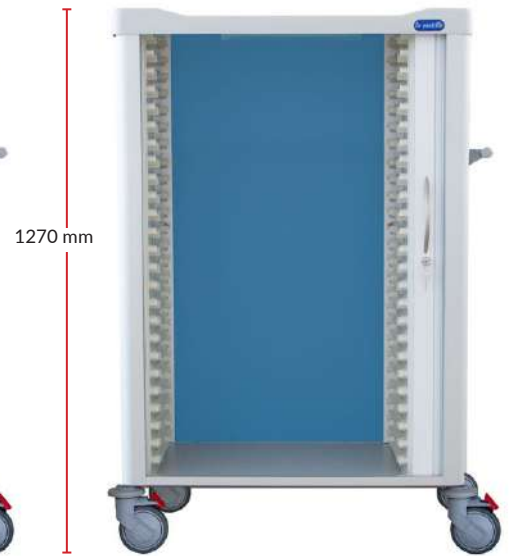

F-C-6040-1850

F-C-6040-1500



1850 mm



Superficie de trabajo / work surface

- Plano superior moldeado con 3 rebordes
- Fabricada en plástico ABS / PC
- Totalmente desmontable
- Alta resistencia a productos químicos y de desinfección de uso común en centros hospitalarios. No se degrada
- Superficie lisa y sin poros para una fácil limpieza
- Área útil de trabajo: 770 x 480 mm
- Molded upper plane with 3 rounded ridges
- Made of ABS / PC plastic
- Fully removable
- High resistant to chemicals and disinfection products of common use in hospitals
- Smooth surface for easy cleaning and disinfection
- Useful work surface: 770 x 480 mm



Puerta persiana / Shutter door

- Persiana ciega, impide completamente el paso de luz
- Fabricada en PVC
- Apertura lateral enrollable
- Tirador de aluminio
- Cerradura con llave incluida (2 llaves)
- Blind shutter, prevents the passage of light
- Made of PVC
- Side roll-up opening
- Aluminum handle
- Key lock included (2 keys)



Paredes con guías / Walls with guides

- Fabricadas en plástico ABS de fácil limpieza
- Gran capacidad de almacenamiento
- Deslizamiento fácil y rápido del contenido interno
- Favorecen la versatilidad y personalización del carro
- Adaptadas a cassettes, bandejas y cestas ISO 600 x 400 mm con diferentes alturas
- Admiten topes para evitar extracciones accidentales
- Made of ABS plastic of easy cleaning
- Large storage capacity
- Quick and easy scrolling of internal content
- They favor the versatility and customization of the cart
- Adapted to ISO 600 x 400 mm cassettes, trays and baskets with different heights
- They admit stops to avoid accidental extractions

